

SOP VENTILATOR IF SIPAP

SISTEM LAYAR SENTUH (TOUCH SCREEN)

Pilih yang diinginkan, putar tombol untuk setting

PERSIAPAN UNTUK PASIEN:



1. Siapkan Sirkuit , generator yang dipakai disesuaikan
2. Siapkan Nasal Pronges ,atau Nasal Mask pasien dengan ukuran yang sesuai
3. Siapkan Abdominal Respiratory sensor jika menggunakan mode (ncpap+apnea,biphasic+apnea,biphasic tr+apnea)
4. Siapkan Headgear sesuai dengan lingkar kepala pasien .
5. Pasangkan (Fixasi) ke pasien

TAHAPAN2 YANG DILAKUKAN DALAM MENGGUNAKAN VENTILATOR IF SIPAP :

1. Siapkan humidifier, chamber dan isi dengan aquabidest sampai dibawah batas atas (pertengahan)
2. Sambungkan kabel cord mesin ke instalasi listrik ,juga sambungkan Udara Tekan (Compres air) dan O2 dengan tekanan harus yg sama (mis 50Psi) atau harus sama sama sama 3 bar.
3. Hidupkan Humidifier, +10 menit sebelum Ventilator digunakan ke Pasien.

TAHAPAN SELANJUTNYA ADALAH KALIBRASI IF SIPAP

1. Tutup dengan rapat Pronges/ Mask, jangan sampai bocor
2. Kalibrasi Oxygen sensor 21 dan 100 % naikkan press low ,sampai tanda silang merah berubah menjadi ? tekan CAL , setting O2 buka hanya 21 % , tekan tulisan ? dibawah 21% , tunggu sampai berubah menjadi ✓ , kemudian keluar tanda ? dibawah 100 ,buka oxygen naikkan ke 100% secara perlahan secara bertahap , sampai menunjukkan angka mendekati 100% , tekan ? dibawah angka 100, tunggu . sampai ✓ tekan exit.

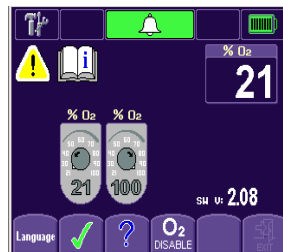
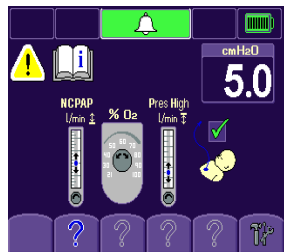


3. Kalibrasi pressure

Tetap Tutup dengan rapat Pronges/ Mask, jangan sampai bocor, lalu naikkan press low flow ke angka 8 , tekan ? dibawah tulisan NCPAP, sampai ✓.

Setting FIO2 sesuai kebutuhan pasien , diputar misal 40 % ,sampai dalam kotak tertulis ± 40% tekan ? dibawah % O2 , kemudian sampai ✓ ,setting pressure high keatas sampai ke angka 3 berhenti mis sampai angka dalam kotak . 10 cm H2O tekan ? dibawah pressure high sampai ✓

4. Kalibrasi utk abdominal sensor , tekan ? dibawah gambar bayi+abdominal sensor, tekan sampai ✓
5. Untuk setting alarm limit MAP dan FIO2 .tekan tulisan alarm (gambar bell) ±3 dtk langsung terbentuk batas atas dan bawah .
6. Pilih MMode yang diinginkan ke pasien dengan tekan mode.

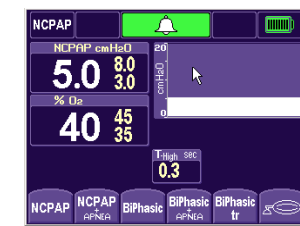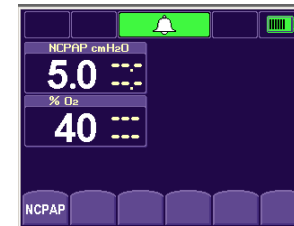

Cara mematikan mesin

Tekan tombol power on/off bagian belakang. sebelum mesin dimatikan sebaiknya FIO2 diturunkan 21 % gunanya untuk pemeliharaan Oxygen sensor

PT Demka Sakti

Contact Persons Product Support

Sdr Jufri (Jkt)	0816873218
Sdr Eka	085219130869
Sdr Hamied	08121015891
Sdr Afif	081314254818
Sdr Rofi	085642832675
Sdr Dimas (sby)	082122825575
Sdr zuhendi (sby)	085731103990